


 NOVAFON

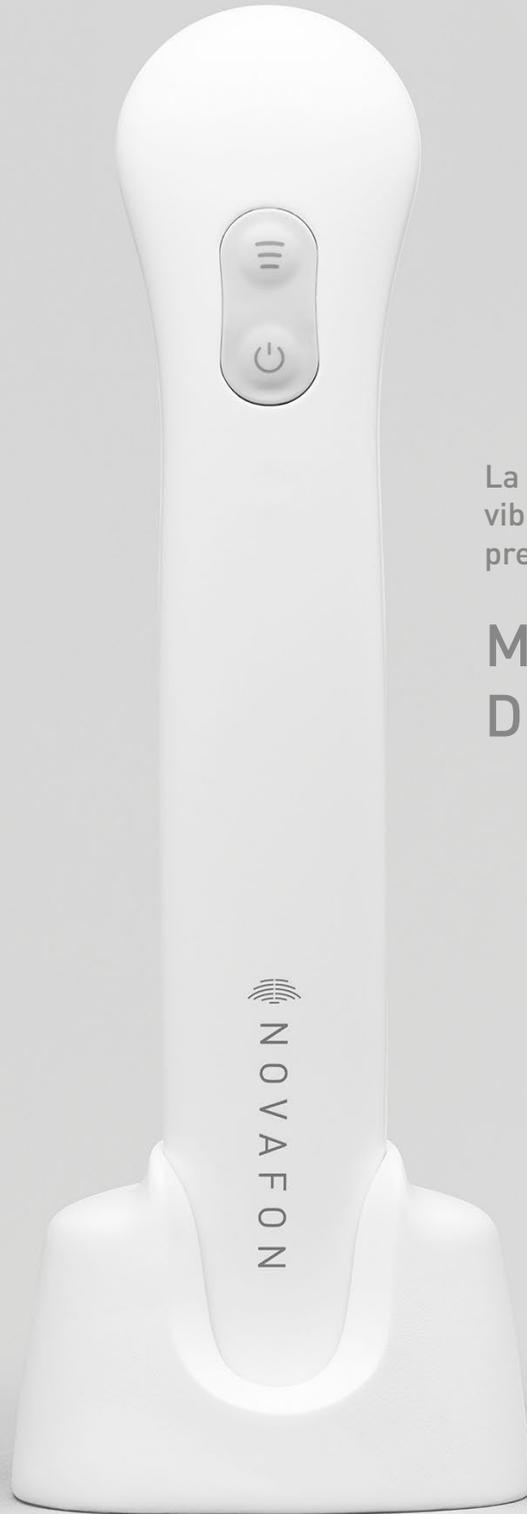

La nueva terapia de
vibración localizada y
precisa de **NOVAFON**

MANUAL DE USUARIO

1 INFORMACIÓN GENERAL: EL NUEVO NOVAFON

La batería

Opciones de configuración inteligente
 Mejor agarre y movilidad
 Sistema de enchufe inteligente
 Gama de tratamientos


1.1 La batería:

El nuevo NOVAFON ofrece 360° de libre movimiento para ejecutar el tratamiento. La batería con un uso regular tiene una duración de 3,5 horas. El tiempo de carga es de dos horas. El dispositivo es inalámbrico y se puede utilizar en casi cualquier sitio. Al no tener cable se puede utilizar tanto en el hogar, como en un centro de estética, o incluso en algún traslado.




1.2 Opciones de ajuste inteligente:

Entre sus opciones de ajuste inteligente el dispositivo cuenta con un sistema intuitivo para cambiar de nivel. Todos los ajustes se pueden controlar de forma intuitiva con solo una mano. Es posible cambiar de nivel mientras realiza el tratamiento, el cambio de uno a otro se fusiona a la perfección. El dispositivo ofrece 2 frecuencias distintas y 3 niveles de intensidad por cada frecuencia. Cuenta con opciones de ajuste específicas según el tipo de tratamiento deseado. Además, tiene un sencillo sistema para recordar los ajustes de cada paciente.

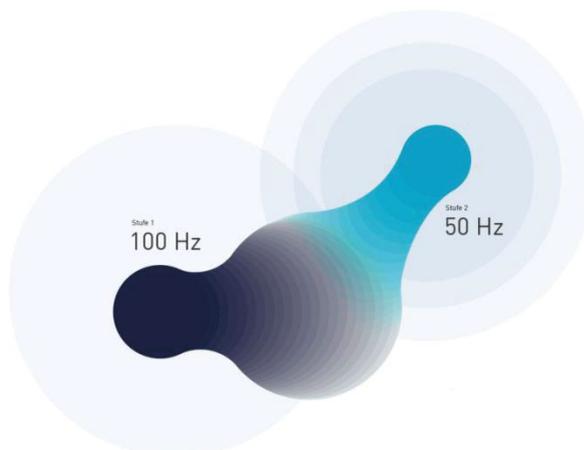


1.3 Mejor sujeción

El dispositivo cuenta con distintas formas de agarre y se puede controlar intuitivamente con una sola mano. Se puede coger y manipular de varias maneras gracias a su forma ergonómica, por lo que ofrece un agarre cómodo y eficiente. Además, aplicar las vibraciones de forma específica es muy sencillo. Los ajustes se pueden configurar fácilmente con la misma mano con la que se sujeta el dispositivo apretando el botón multifunción.

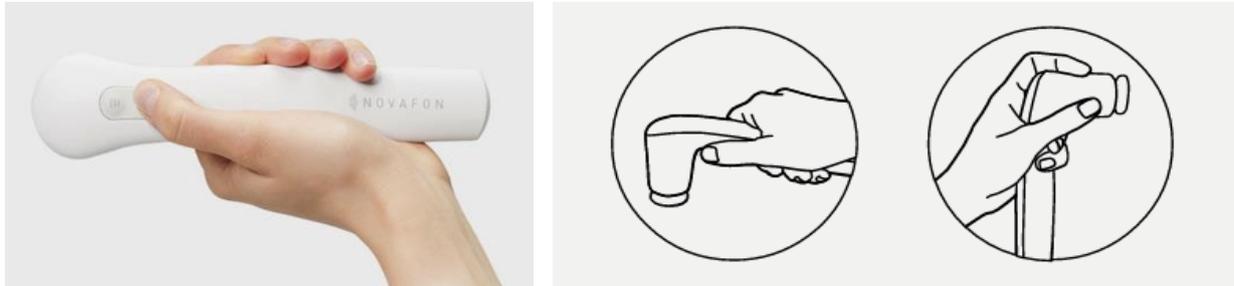

1.4 Sistema de enchufe inteligente

Cambiar los accesorios del dispositivo es fácil. Con el sistema de enchufe inteligente se pueden poner y quitar los accesorios fácilmente sin ningún tipo de esfuerzo o habilidad. Aquellas personas con discapacidades físicas en las manos no tendrán problemas para utilizar el dispositivo ya que es muy sencillo de utilizar. Esto permite que a su vez, realizar el tratamiento sea fácil y rápido.

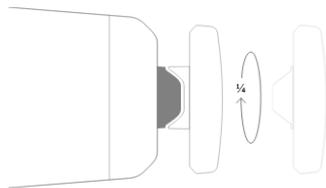

1.5 Gama de tratamientos

Con el nuevo dispositivo NOVAFON es posible tratar muchos síntomas, ya sea en casa o en un centro de estética profesional. El nuevo NOVAFON abrirá una puerta hacia nuevos nichos de mercado, como por ejemplo, en el de las clínicas veterinarias. Proporcionará beneficios totalmente innovadores en este mercado debido a que el dispositivo es inalámbrico.

No hay que olvidar que además de nuestros clientes ya existentes, y de todos los fanáticos que hay de NOVAFON, nosotros estamos siempre en busca de nuevos clientes que no hayan oído hablar nunca de la marca ni de sus ventajas. Así que no dejes a un lado nuestro mensaje de marketing, el cual trata sobre los beneficios básicos de la terapia de vibración localizada (de hecho es el mensaje principal que tenemos también en la página web del nuevo dispositivo NOVAFON):



Reduce dolor en los tendones



Disminuye dolor muscular



Alivia el dolor en las articulaciones



Mejora nuestra forma de agarre y movilidad



Mejora nuestra forma de andar



Mejora nuestra percepción

2 EQUIPO

2.1 Set de rehabilitación:

Además del set de rehabilitación ya existente, habrá uno nuevo, el cual contará con un sistema de enchufe imantado.

Los accesorios serán prácticamente los mismos, salvo algunas mejoras en los accesorios en forma de cono, ya que muchos terapeutas pidieron una versión más alargada para alcanzar los puntos más profundos entre los dedos y las articulaciones.



- Cono → Es exacto y preciso
- Erizo → Es para estimular
- Disco XL → Es para tratar áreas grandes

2.2 Accesorios imantados:

Además de los accesorios imantados ya existentes habrá una versión renovada de un sistema nuevo de enchufe en su color estándar: blanco. Próximamente añadiremos versiones también en color dorado y cromo.



- Agrupa y amplifica las ondas sonoras
- Selectivo e intensivo
- Imán de 3200 Gauss

2.3 Rodillo sensorial

El rodillo sensorial existente es compatible con el nuevo dispositivo NOVAFON aunque será necesario utilizar un adaptador estándar.



- Set de tres rodillos
- Estimula la superficie y las capas más profundas
- Alivia el dolor y mejora la circulación sanguínea

2.4 Set intraoral

El set IO ya existente es compatible con el nuevo NOVAFON aunque será necesario utilizar un adaptador estándar.



- 4 accesorios intraorales
- Punta de flecha, cuchara y barra con esfera
- Aplicador intraoral

2.5 Manual



- Una copia por dispositivo
- El contenido será similar a la versión ya existente y contendrá imágenes actualizadas
- Nociones anatómicas y guía para usar NOVAFON

2.6 Base de carga



- El dispositivo se carga de forma práctica después de cada uso
- La base cuenta con un diseño profesional
- Es fácil de usar

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso

243 gr aprox.

Batería

Tipo Li-Ion, 2400mAh, 3,7 V
Duración 700mA aprox. 3,5 h
Tiempo de carga aprox. 2h

Cable de carga

Accesorios: cable USB-C, adaptador
Color: blanco
Extensión: 1m

Adaptador de corriente

Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz
Salida: 5V DC/2A

Frecuencias

100Hz (nivel 1) / 50Hz (nivel 2)

Niveles de intensidad

3 por nivel

**Material de la carcasa
y de los accesorios**

Plásticos de ingeniería
Complemento perfecto
Base de carga



4 TAMAÑO DEL EMBALAJE

1 unidad de embalaje

Dispositivo con accesorios incluidos, excluyendo la base de carga

Peso: 575g

Tamaño: 22,6 cm x 9,3 cm x 8,5 cm

Largo x Ancho x Alto

Base de carga PU

Peso: 375g

Caja de envío

= 27 elementos

Peso: 15,5 kg aprox.

Tamaño:

58cm x 40cm x 31,5cm

Largo x Ancho x Alto



Desglose del producto

Dispositivo de onda de sonido NOVAFON, disco, bola, enchufe de encendido, cable USB-C para cargar y adaptador para accesorios opcionales.